

Instrukcja obsługi


PURENO OH300

Irygator do jamy ustnej



 pureno

1 Widok urządzenia

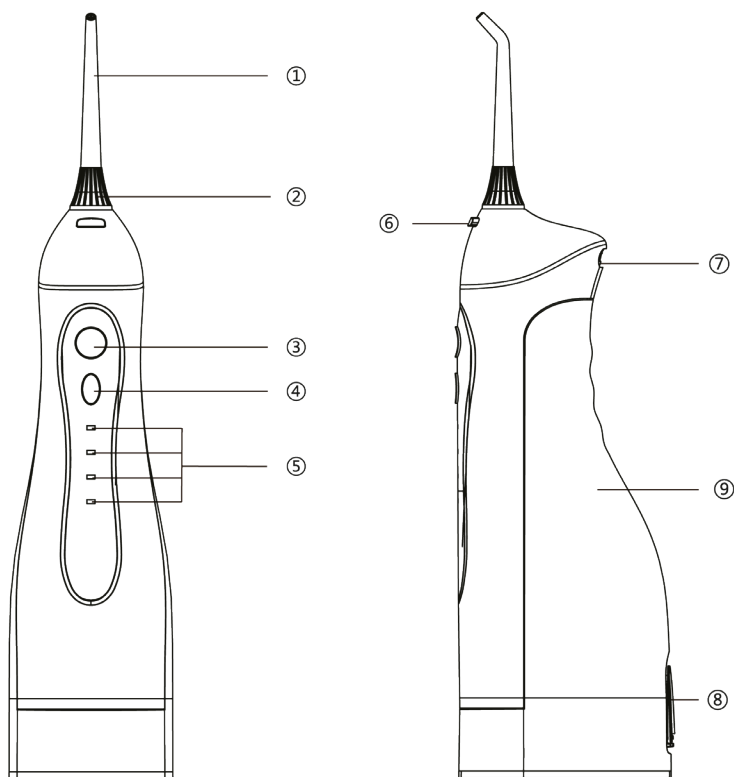

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Końcówka dyszy | 6. Przycisk zwalniania końcówki |
| 2. Pokrętło obrotu końcówki | 7. Port ładowania |
| 3. Przycisk zasilania | 8. Zbiornik na wodę |
| 4. Przycisk wyboru poziomu intensywności | 9. Korek zbiornika na wodę |
| 5. Kontrolka trybu pracy (wskaźnik ładowania) | |

1.1 Akcesoria



Przewód USB
do ładowania
x 1 szt.



Końcówka do
czyszczenia języka
x 1 szt.



Końcówka
ortodontyczna
x 1 szt.



Końcówka
periodontologiczna x 1 szt.



Końcówka
standardowa
x 2 szt.

2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Przedmowa

Drodzy klienci,

dziękujemy za zakup irygatora OH300 marki PURENO.

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu pomóc Państwu w zapoznaniu się z funkcjami nowego urządzenia i optymalnym ich wykorzystaniu. Pomogą one Państwu korzystać z odkurzacza bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem. Jest ona przeznaczona dla każdej osoby, która instaluje, obsługuje, czyści lub utylizuje urządzenie.

Instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu wykorzystania jej w przyszłości. Aktualna wersja instrukcji obsługi znajduje się na stronie internetowej TechniSat w sekcji pobierania dla danego produktu www.technisat.pl

Zespół TechniSat

2.2 Zastosowane znaki i symbole

W niniejszej instrukcji zastosowano znaki:



Wskazuje na środek ostrożności, którego nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Przestrzegać następujących słów sygnalizacyjnych:

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Poważne obrażenia ciała, z możliwością śmierci

OSTRZEŻENIE - Ciężkie obrażenia ciała, które mogą prowadzić do śmierci.

UWAGA - Obrażenia.



Wskazuje na środek ostrożności, którego nieprzestrzeganie może spowodować poważne obrażenia ciała. Opisuje on również dodatkowe funkcje urządzenia oraz uwagi, których należy przestrzegać, aby uniknąć usterek urządzenia.



Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji bezpieczeństwa, aby uniknąć porażenia prądem. Nigdy nie otwierać urządzenia.

Symbole na urządzeniu:



Użytkowanie wewnątrz pomieszczeń - Urządzenia oznaczone tym symbolem są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Urządzenie posiada znak CE i jest zgodne z wszystkimi wymaganymi normami UE.



Wskazuje, że wymagany jest zasilacz USB-A.

IPX7 Stopień ochronności IPX7, zgodnie z którym urządzenie jest wodoodporne do głębokości zanurzenia maksymalnie 1 m przez czas nie dłuższy niż 30 minut (dotyczy części urządzenia znajdującej się najniżej).



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kołowego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE oraz zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i

Rady 2006/66/WE i informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać go do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów tworzącego system zbierania takich odpadów w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym. Pod koniec cyklu życia produktu nie należy go wyrzucać do śmieci z normalnych odpadów domowych lecz do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wskazuje to symbol umieszczony na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu. Materiały nadają się do recyklingu zgodnie z etykietą. Dzięki ponownemu wykorzystaniu, recyklingowi lub innym formom recyklingu starego sprzętu w istotny sposób przyczynia się Państwo do ochrony środowiska naturalnego.



Przestrzegaj wskazówek/wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi.

2.3 Przeznaczenie urządzenia

Irygator Pureno OH300 przeznaczony jest do codziennego czyszczenia przestrzeni międzyzębowych, aparatów ortodontycznych oraz masażu dziąseł.

Dzięki pulsującemu strumieniowi wody pod ciśnieniem skutecznie usuwa resztki jedzenia, płytkę nazębną i bakterie z trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej, Działa jako uzupełnienie tradycyjnej szczoteczki i nici dentystycznej, poprawiając higienę i zdrowie dziąseł poprzez delikatne masowanie oraz poprawę ukrwienia tkanek.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku prywatnego i nie jest przystosowane do eksploatacji komercyjnej.

2.4 Bezpieczne obchodzenie się z produktem

Należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby zminimalizować zagrożenia dla bezpieczeństwa, uniknąć uszkodzeń urządzenia i przyczynić się do ochrony środowiska.

Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość. Należy zawsze przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji oraz na urządzeniu.



ZAGROŻENIE!

- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia.

Dotykanie elementów pod napięciem, zwłaszcza zasilacza jest niebezpieczne dla życia!

- Przechowuj urządzenie i przeprowadzaj ładowanie tylko w zamkniętych pomieszczeniach.
- Nigdy nie dotykaj urządzenia, zasilacza i kabla przyłączeniowego mokrymi rękami, gdy elementy te są podłączone do sieci.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo uduszenia!

- Nie należy pozostawiać opakowania, części opakowania, folii i dołączonych akcesorii pod opieką dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia przez folie i inne materiały opakowaniowe!
- Końcówki irygatora należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu, które może skutkować zablokowaniem dróg oddechowych.
- Upewnij się, że przewód zasilający zawsze znajduje się poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt.



Niebezpieczeństwo pożaru spowodowanego przez akumulatory!

- Nie demontuj, nie wrzucaj do ognia, nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur przekraczających +40 °C, nie zanurzaj w cieczach ani nie dopuszczaj do zwarcia akumulatora. Może to spowodować zapłon lub wybuch akumulatora.
- Chroń silnik i akumulator przed kontaktem z wodą.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przedostała się do niego ciecz. Może to spowodować zapłon lub wybuch akumulatora.
- Nie przykrywaj urządzenia i zasilacza podczas ładowania, aby uniknąć pożaru urządzenia. Nie wkładaj żadnych obiektów do otworów wentylacyjnych urządzenia i upewnij się, że nie są one zablokowane.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z oryginalnym przewodem zasilającym dostarczonym wraz z urządzeniem.



Ważna uwaga dotycząca utylizacji akumulatorów: Akumulator wbudowany w urządzenie może zawierać substancje toksyczne i szkodzić środowisku. Dlatego ważne jest, aby utylizować urządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nigdy nie wyrzucaj irygatora do zwykłych odpadów domowych. Zużyte baterie można bezpłatnie zutylizować u sprzedawcy lub w specjalnych punktach utylizacji.



W celu zapewnienia prawidłowego użytkowania urządzenia oraz uniknięcia uszkodzeń urządzenia i obrażeń ciała należy przestrzegać wszystkich poniższych instrukcji.

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nie posiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem lub zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one więcej niż 8 lat i znajdują się pod nadzorem osób

dorosłych.

- Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwól aby dzieci bawiły się urządzeniem. Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia kiedy w pobliżu znajdują się dzieci. Dzieci nie powinny korzystać z urządzenia bez opieki osoby dorosłej.
- Urządzenia nie należy przechowywać ani pozostawiać w miejscach, gdzie istnieje ryzyko, że wpadnie do wanny, umywalki lub innego zbiornika z wodą.
- Urządzenie pozbawione nadzoru musi być zawsze odłączone od sieci elektrycznej. To samo dotyczy odłączenia przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
- Urządzenie może być eksploatowane wyłącznie w określonych dla niego warunkach otoczenia.
- Z irygatora należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem – urządzenie jest stworzone do pielęgnacji i czyszczenia jamy ustnej i powinno być używane tylko w tym celu, wyłącznie w jamie ustnej.
- Używaj wyłącznie końcówek i akcesoriów dołączonych do zestawu.
- Nie używaj irygatora podczas kąpieli.
- Nie zanurzaj irygatora w wodzie lub w innych płynach.
- Irygator należy stosować wyłącznie z zimną lub ciepłą wodą,
- Zbiornik irygatora należy napełniać wyłącznie wodą, której temperatura nie przekracza 40 °C.
- Nie wlewaj do pojemnika na wodę płynu do płukania jamy ustnej, może spowodować to uszkodzenie urządzenia.
- Zabronione jest czyszczenie części urządzenia w zmywarce.
- Nie używaj irygatora, jeśli masz otwartą ranę na języku lub w jamie ustnej.
- W przypadku wystąpienia silnego krwawienia, bólu, wyraźnego stanu zapalnego lub innych niepokojących objawów w obrębie jamy ustnej, stosowanie irygatora jest niewskazane. W takiej sytuacji należy przerwać używanie urządzenia i skonsultować się ze stomatologiem.
- Osoby, które w ciągu ostatnich dwóch miesięcy przeszły zabiegi chirurgiczne lub poważne leczenie stomatologiczne w obrębie jamy ustnej, powinny przed użyciem irygatora skonsultować się ze stomatologiem
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie korzystaj z urządzenia na zewnątrz.
- Nie narażać urządzenia na działanie kapiącej lub pryskającej wody. Jeśli do urządzenia dostanie się woda, należy je wyłączyć i powiadomić serwis.
- Nie należy narażać urządzenia na działanie źródeł ciepła, które nagrzewają urządzenie oprócz normalnego użytkowania.
- Zabrania się dokonywania zmian w urządzeniu.
- W przypadku zauważalnej wady urządzenia, pojawienia się zapachu lub dymu, znacznych zakłóceń w pracy lub uszkodzenia obudowy, należy niezwłocznie skontaktować się z serwisem.
- Urządzenie może być zasilane wyłącznie napięciem sieciowym podanym

w specyfikacji. Nie wolno próbować obsługiwać urządzenia pod innym napięciem. Należy używać wyłącznie dostarczonego przewodu zasilającego.

- Z uwagi na zasady bezpieczeństwa uszkodzoną wtyczkę wymienić może autoryzowany serwis producenta.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia lub zasilacza.
- Należy regularnie sprawdzać irygator pod kątem uszkodzeń.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie należy go używać.
- Nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów.
- Nie należy włączać urządzenia podczas jego czyszczenia lub konserwacji.
- Nie dotykaj wtyczki lub urządzenia mokrymi rękami.
- Z urządzenia można korzystać tylko wtedy, gdy jest ono kompletnie i prawidłowo zmontowane! Pojemnik na wodę i końcówka muszą być włożone i nie mogą być uszkodzone! Przedostanie się zanieczyszczeń do wnętrza silnika może spowodować jego uszkodzenie.
- Urządzenie musi być wyłączone podczas odłączania zasilacza lub w trakcie podłączania do gniazdka. W celu odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej, zawsze pociągaj za zasilacz, a nigdy za kabel sieciowy!
- Nie używaj urządzenia, gdy jest ono nadal podłączone do zasilania.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów w celu zapewnienia prawidłowej pracy urządzenia i uniknięcia ewentualnych uszkodzeń.

3 Opis urządzenia

3.1 Zawartość zestawu

Przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy zestaw jest kompletny:

1x Irygator Pureno OH300	1x Końcówka do czyszczenia języka
2x Końcówka standardowa	1x Przewód zasilający
1x Końcówka ortodontyczna	1x Etui podróżne
1x Końcówka periodontologiczna	1x Instrukcja obsługi

4 Ładowanie irygatora

Przed pierwszym użyciem oraz w przypadku, gdy irygator nie był używany przez co najmniej 3 miesiące należy naładować urządzenie.



OSTRZEŻENIE!

- Nie należy dotykać zasilacza i przewodu USB mokrymi rękami, ryzyko porażenia prądem! Upewnij się przed włożeniem wtyczki do urządzenia, że gniazdo jest suche i nie ma w nim wody.
- Delikatnie pociągnij i odchyl gumową osłonę gniazda ładowania w irygatorze i włóż do gniazda końcówkę przewodu zakończoną wtykiem USB-C.
- Podłącz drugi koniec przewodu ładowania do portu USB-A w komputerze lub ładowarce USB o parametrach wyjściowych DC 5V - 1A (brak w zestawie).
- Jeżeli używasz ładowarki podłącz wtyczkę ładowarki do gniazda sieci elektrycznej.

- Podczas ładowania wskaźnik będzie migał i zwiększał wartość, aż do pełnego naładowania baterii.
- Po całkowitym naładowaniu wszystkie wskaźniki będą świecić światłem stałym.
- Odlącz przewód od urządzenia po zakończeniu ładowania i załóż osłonę na gniazdo ładowania.

Stan naładowania akumulatora	Wskaźnik poziomu naładowania
Rozładowany	Urządzenie nie uruchamia się, migają wszystkie wskaźniki Low-> Medium -> High -> Pulse
Ładowanie	Wskaźnik miga zwiększając wartość Low 20% -> Medium 40% -> High 60% -> Pulse 80%
W pełni naładowany	Wszystkie wskaźniki świecą światłem stałym Low / Medium / High / Pulse


- i** Pełne naładowanie akumulatora może zająć do 5 godzin.
- i** Wyciągnij wtyczkę zasilacza USB z gniazdka sieciowego, gdy nie jest używana. Ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel. Odlącz urządzenie od prądu przed burzą. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odlącz je od zasilania.
- i** Gumowa osłona gniazda USB-C powinna być otwarta tylko podczas ładowania urządzenia. W każdym innym przypadku, powinna być włożona aby chronić gniazdo ładowania przed uszkodzeniem.

5 Pierwsze uruchomienie

5.1 Napełnienie zbiornika wody

Przed napełnieniem zbiornika upewnij się, że produkt jest wyłączony.

- Otwórz korek zbiornika na wodę znajdujący się z tyłu urządzenia.
- Ustaw urządzenie poziomo otwartym wlotem na wodę do góry.
- Napełnij zbiornik letnią wodą i zamknij korek zbiornika na wodę.

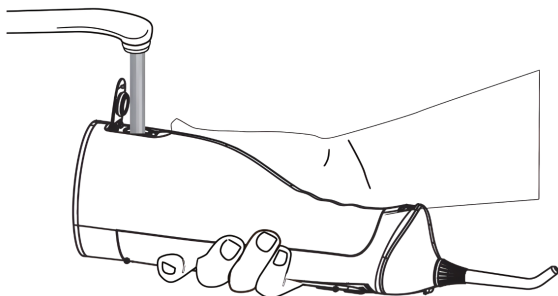


- i** Należy stosować wyłącznie zimną lub ciepłą wodą, o temperaturze nie przekraczającej 40 °C.



Nie wlewaj do pojemnika na wodę płynów innych niż woda, a w szczególności płynu do płukania jamy ustnej, roztworów sody oczyszczonej czy olejków eterycznych. Może doprowadzić to do powstawania osadów, zanieczyszczeń, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

5.2 Wkładanie i wyjmowanie końcówek

- Wyjmij z opakowania jedną z końcówek.
- Włóż końcówkę do otworu u góry irygatora i delikatnie dociśnij. Przycisk blokady powinien kliknąć.
-  Upewnij się, że końcówka została wsunięta do końca i jest wyrównana z górną częścią urządzenia.
- Aby wyjąć końcówkę z irygatora, naciśnij przycisk zwalniania i wyciągnij końcówkę z rękojeści.
-  Nie naciskaj przycisku zwalniania końcówki podczas pracy urządzenia.

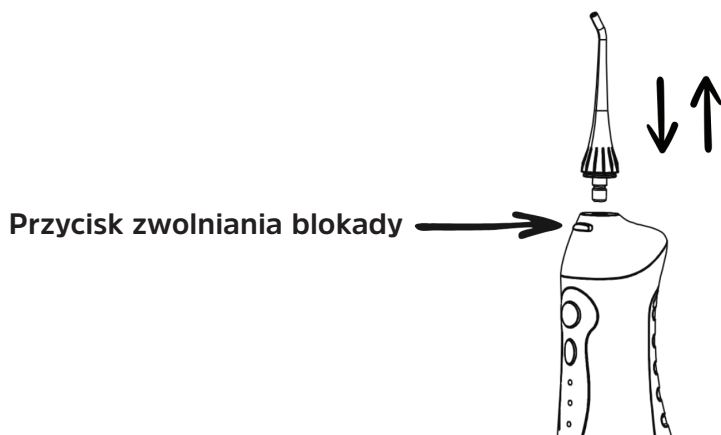

5.3 Wybór trybu intensywności

Irygator oferuje pracę w czterech trybach intensywności.

- Aby zmienić tryb intensywności naciśnij przycisk **MODE**. Przy aktualnie wybranym trybie pracy zaświeci się dioda stanu.
- Kolejne naciśnięcia przycisku **MODE** powodują przełączanie się między kolejnymi trybami.

- Low** - do delikatnego czyszczenia wrażliwych dziąseł
- Normal** - do normalnego czyszczenia
- High** - tryb wysokiego ciśnienia
- Pulse** - tryb pulsacyjny



UWAGA - Zaleca się, aby rozpocząć korzystanie z irygatora od najniższego poziomu intensywności i stopniowo zwiększać intensywność w kolejnych tygodniach.

5.4 Korzystanie z irygatora (końcówka standarowa)

Urządzenie włącza się i wyłącza przyciskiem **ON/OFF**.

Przed włączeniem urządzenia skieruj końcówkę w kierunku umywalki. Uruchom irygator i pozwól aby woda została rozpylona do umywalki. Po wytryśnięciu wody z urządzenia wyłącz je przyciskiem **ON/OFF**.

Aby uzyskać najlepsze wyniki trzymaj urządzenie w pozycji pionowej podczas użytkowania.

Pochyl się nad umywalką i umieść końcówkę w ustach. Skieruj ją na linię dziąseł pod kątem 90°. Lekko zamknij usta, aby uniknąć zachlapania. Pozostaw małą przestrzeń, aby woda swobodnie wypływała z ust do umywalki. Uruchom irygator przyciskiem **ON/OFF**.

Zacznij od tylnych zębów. Przesuwaj końcówkę wzdłuż linii dziąseł i na chwilę zatrzymuj się między zębami. Kontynuuj, aż wyczyścisz wewnętrzną i zewnętrzną stronę górnych i dolnych zębów.

Po zakończonej irygacji wyłącz urządzenie przyciskiem **ON/OFF** i opróżnij urządzenie z wody zgodnie z **pkt 6**.



Urządzenie wyłączy się automatycznie po dwóch minutach korzystania.


6 Osuszanie zbiornika na wodę

Nie zostawiaj resztek wody w zbiorniku, może to powodować rozkwit bakterii. Po każdym użyciu wylej pozostałą wodę ze zbiornika i włącz irygator na 2-3 sekundy aby usunąć resztki wody z urządzenia.


6.1 Demontaż zbiornika

Zbiornik na wodę można wyjmować w celu łatwiejszego czyszczenia. Zaleca się wyjmowanie i czyszczenie zbiornika co tydzień.

- Ustaw urządzenie na płaskiej powierzchni.
- Przytrzymaj zbiornik na wodę prawą ręką, a lewą pociągnij korpus urządzenia ku górze.
- Aby zamontować zbiornik z powrotem umieść korpus na zbiorniku i dociśnij aż do zatrzaśnięcia.

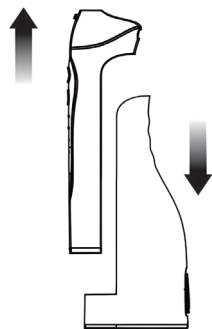

W razie potrzeby można zdemonstrować podstawę zbiornika przesuwając dwa zatrzaski do wewnątrz (pozycja odblokowania), a następnie pociągnąć podstawę w dół.

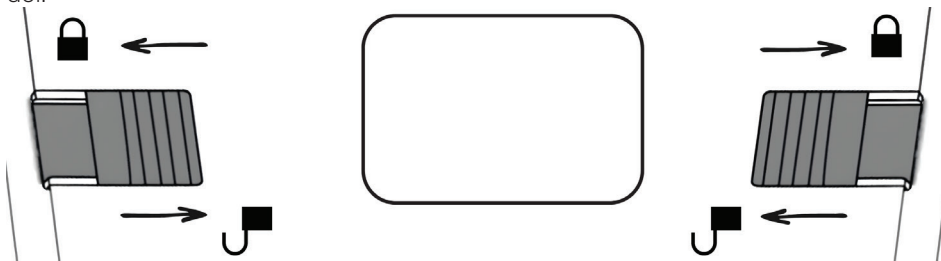

Wkładając podstawę proszę zwrócić uwagę na wypustkę wewnątrz zbiornika. Po zamotowaniu należy zablokować zatrzaski przesuwając je w kierunku zewnętrznym.

7 Wskazówki dotyczące końcówek



Końcówki do irygatora należy regularnie wymieniać na nowe.

Końcówkę standardową i dyszę do języka co 6 miesięcy.

Końcówkę ortodontyczną i periodontologiczną co 3 miesiące.

Końcówka standardowa: przeznaczona do codziennego użytku, oczyszcza zęby z pozostałości po jedzeniu i płytkę bakteryjną.

Skieruj końcówkę na linię dziąseł pod kątem 90 stopni do zębów. Zaczynij od tylnych zębów. Przesuwaj końcówkę wzdłuż linii dziąseł i na chwilę zatrzymuj się między zębami. Kontynuuj, aż wyczyścisz wewnętrzną i zewnętrzną stronę górnych i dolnych zębów.

Końcówka ortodontyczna: przeznaczona do pielęgnacji przestrzeni wokół aparatów, koron, mostów i implantów.

Zacznij czyszczenie od ostatniego trzonowca (tylnego zęba). Ustaw końcówkę pod kątem 90 stopni na zamku. Delikatnie przesuwaj końcówkę wzdłuż linii dziąseł, zatrzymując się na chwilę, aby wyczyścić przestrzeń między zębami oraz wokół zamka ortodontycznego. Kontynuuj, aż dokładnie oczyścisz wnętrze jamy ustnej.

Końcówka do mycia języka: przeznaczona do czyszczenia języka z nalotu i zabrudzeń.

W celu oczyszczenia języka delikatnie umieścić końcówkę na tylnej części języka i przesuwaj ją do przodu, aby oczyścić język. Powtarzaj czynność, aż do całkowitego oczyszczenia. Ustaw irygator na najniższym poziomie ciśnienia wody, w razie potrzeby stopniowo zwiększaj ciśnienie.


Końcówka periodontologiczna: używana do płukania kieszonek przyzębnych i obszarów pod dziąslami.

Przyłóż miękką końcówkę do zęba pod kątem 45 stopni tak aby gumowe zakończenie skierowane było do kieszonki. Uruchom irygator, ustawiając go na najniższe ciśnienie. Delikatnie podążaj wzdłuż linii dziąseł, do momentu wyczyszczenia wszystkich kieszonek dziąsłowych.

7.1 Parametry ładowania

Minimalna moc wymagana do ładowania urządzenia wynosi 2W (5V/400mA).

Moc gwarantująca maksymalną prędkość ładowania wynosi 5W (5V/1A).

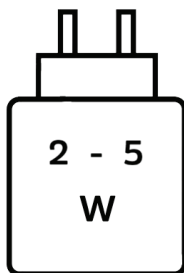

8 Rozwiązywanie problemów

Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z przeznaczeniem, należy sprawdzić je w oparciu o poniższą tabelę.


Symptom	Możliwa przyczyna / rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się	Sprawdź poziom naładowania baterii.
	Ciągła praca przez dłuższy czas aktywowała zabezpieczenie przed przegrzaniem. Uruchom ponownie urządzenie za 20 minut.
Zbiornik przecieka	Odlącz zbiornik od urządzenia, sprawdź uszczelkę przy wlewie wody, podstawie oraz sam zbiornik pod kątem uszkodzeń. W przypadku usterki skontaktuj się z serwisem producenta.
Niskie ciśnienie wody z irygatora	Sprawdź poziom naładowania baterii.
	Sprawdź czy końcówka nie jest zablokowana. Wyczyść końcówkę lub wymień na nową.
Urządzenie działa ale nie wypływa woda	Sprawdź, czy zbiornik na wodę jest czysty i znajduje się w nim odpowiednia ilość wody.
	Sprawdź czy końcówka nie jest uszkodzona lub zatkana. Wyczyść końcówkę lub wymień ją na nową.
Urządzenie nie ładuje się	Sprawdź, czy przewód ładujący został poprawnie podłączony i nie jest uszkodzony.
	Sprawdź czy źródło zasilania, do którego podłączony jest przewód jest sprawne.

Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, skontaktuj się z serwisem producenta.

Może się zdarzyć, że z końcówka nie będzie rozpylać wody po uruchomieniu urządzenia (szczególnie przy pierwszym użyciu lub dłuższym okresie bezczynności).

Należy wówczas nalać wody do miejsca, w którym umieszcza się końcówkę.

Po zalaniu Proszę włożyć nową końcówkę i uruchomić urządzenie aż do wytryśnięcia wody.

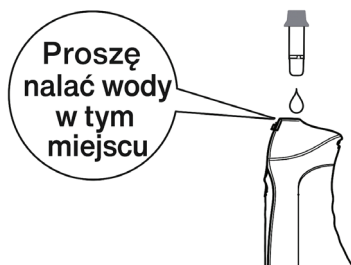

9 Konserwacja i czyszczenie urządzenia

Czyszczenie i konserwacja mogą odbywać się tylko, gdy urządzenie jest wyłączone.

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Elementy urządzenia mogą być czyszczone pod bieżącą wodą o niskim ciśnieniu i temperaturze.

Nie używaj środków czyszczących do mycia urządzenia. W przypadku silnych zabrudzeń wykorzystaj łagodne detergenty w postaci płynu do mycia naczyń.

Dokładnie wysuszysz powierzchnie urządzenia, użyjąc ręcznika papierowego lub tekstylnego i pozostaw do całkowitego wyschnięcia w przewiewnym miejscu.

Dysze umyj pod bieżącą wodą i pozostaw do wyschnięcia.

Okresowo należy czyścić zbiornik na wodę z gromadzących się w nim osadów oraz kamienia. Do tego celu użyj odpowiednich preparatów postępując zgodnie z instrukcją producenta. Po ich zastosowaniu wewnątrz zbiornika należy dokładnie wypłukać i pozostawić do pełnego wyschnięcia.



Nie czyść końcówek, zbiornika i irygatora w zmywarce !

10 Dane techniczne

Model	PURENO OH300
Akumulator	3,7V / 2000mAh
Zasilanie	DC 5V / 1A
Liczba poziomów mocy	3 + pulsacyjny
Pojemność zbiornika	300ML
Czas ładowania	5 godzin
Poziom wodoodporności	IPX7
Wymiary GxSxW	8,3 x 6,5 x 22,5 mm

11 Skład chemiczny zastosowanego akumulatora

Nazwa chemiczna	Numer Cas	Zakres stężeń
Poli(chlorek winylu)	9002-86-2	1,13%
Żelazo	7439-89-6	19,7%
Węglan etylenu	96-49-1	2,87%
Heksafluorofosforan litu	21324-40-3	1,61%
Węglan etylometylu	623-53-0	1,15%
Węglan dimetylu	210-478-4	8,53%
Polietylen	9002-88-4	2,06%
Grafit	7782-42-5	12,5%
Miedź	7440-50-8	6,84%
Nikiel	7440-02-0	0,71%
Karboksymetyloceluloza sodowa	9004-32-4	0,19%
Sadza (węgiel techniczny)	1333-86-4	0,24%
Aluminium	7429-90-5	3,67%
Litowy niklowo-kobaltowy manganian	N/A	22,26%
Tlenek litowo-manganowy	12057-17-9	14,84%
Poli(fluorek winylidenu)	24937-79-9	0,55%
Nanorurka węglowa	308068-56-6	0,35%
Lateks karboksylowany butadieno-styrenowy	25085-39-6	0,26%

12 Wskazówki prawne



TechniSat niniejszym oświadcza, że urządzenie Pureno OH300 jest zgodne z dyrektywami i Normami Europejskimi oraz poprawkami.



TechniSat nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia produktu spowodowane czynnikami zewnętrznymi, zużyciem lub niewłaściwą obsługą, nieautoryzowanymi naprawami, modyfikacjami lub wypadkami.



Zastrzega się możliwość zmian i błędów w druku. Stan na 11/25.
Kopiowanie i powielanie tylko za zgodą wydawcy.

Najnowsza wersja instrukcji jest dostępna w formacie PDF w dziale pobierania na stronie głównej TechniSat pod adresem www.technisat.pl.

13 Wskazówki serwisowe



Ten produkt jest sprawdzony pod względem jakości i objęty ustawowym okresem gwarancji wynoszącym 24 miesiące od daty zakupu. Prosimy o zachowanie paragonu jako dowodu zakupu. W przypadku roszczeń gwarancyjnych koszt przesyłki bezpośrednio do producenta pokrywa klient.



Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady produktu. Usunięcie wad następować będzie poprzez wymianę wadliwego produktu na nowy, wolny od wad lub jego naprawę.



W celu skorzystania z gwarancji nabywca zobowiązany jest zgłosić wadliwość produktu w punkcie sprzedaży, w którym produkt został nabyty oraz dostarczyć tam wadliwy produkt. Produkt powinien zostać dostarczony kompletny.



Gwarancja nie obejmuje wad produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:

- używania lub instalacji produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
- niewłaściwego przechowywania lub konserwacji urządzenia,
- napraw lub przeróbek produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
- dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych,
- wyladowań atmosferycznych i spięć w sieci zasilającej.



Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów) wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.



Uzyskanie szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, nadania numeru RMA, możliwe jest telefonicznie 71 310 41 48 lub mailowo serwis@technisat.com, w dni robocze, w godzinach od 8 do 16.

Zgłoszenia serwisowe ON-LINE przez stronę: www.serwis.technisat.com

14 Producent

TechniSat Digital Sp. z o.o.
ul. Poznańska 2, Siemianice
55-120 Oborniki Śląskie

Biuro Obsługi Klienta
tel.: +48 71 310 40 00,
e-mail: biuro@technisat.com

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-16:00